


INTEGRA

Der richtige Service für Ihren MEDIACLAVE und MEDIAJET

INTEGRA empfiehlt nachdrücklich eine jährliche vorbeugende Wartung des **MEDIAJET**. Dieser Service ist für den **MEDIACLAVE** obligatorisch. Eine Wartung durch qualifizierte Fachkräfte von INTEGRA gewährleistet:

- Sicherer Betrieb des Geräts
- Verlässliche Einsatzbereitschaft des Systems
- Lange Lebensdauer des Geräts

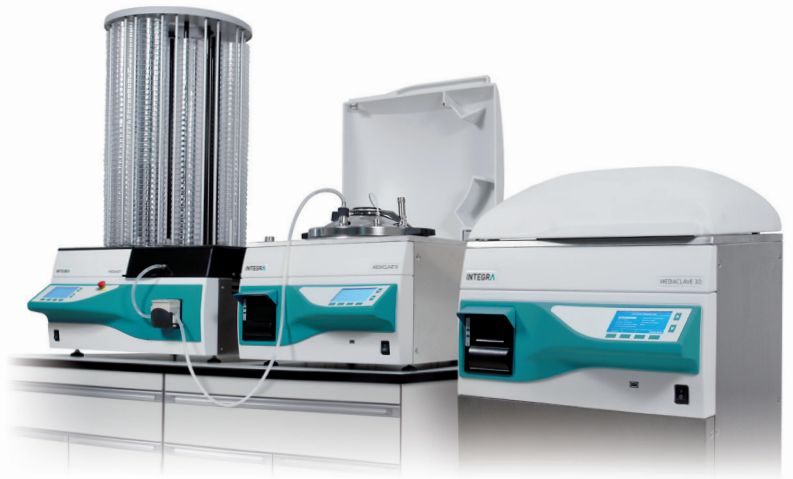

Wählen Sie je nach Ihren Laborbedingungen und Arbeitsabläufen zwischen drei Vor-Ort-Serviceoptionen:

BASIC LIGHT Service

Der BASIC LIGHT-Service ist eine kostengünstige Option für alle, die besonderen Wert auf den sicheren Betrieb ihrer Geräte legen. Diese jährliche Inspektion gewährleistet, dass Ihre Ausrüstung den Sicherheitsstandards entspricht und zuverlässig arbeitet. Zusätzliche Wartungs- oder Reparaturleistungen sind in dieser Servicestufe allerdings nicht enthalten.

BASIC Vorbeugende Wartung

Das Programm BASIC umfasst die jährliche Wartung des Geräts in Ihrem Labor. Dieser Service steigert die Zuverlässigkeit Ihres Geräts und gewährleistet seine Funktionsfähigkeit in Übereinstimmung mit den Herstellungsspezifikationen von INTEGRA.

PLATINUM Vorbeugende Wartung

Das Programm PLATINUM beinhaltet dieselben jährlichen Wartungsdienstleistungen wie das Programm BASIC. Zusätzlich profitieren Abonnenten des PLATINUM-Programms jedoch von einem echten Rundum-Sorglos-Paket, das alle etwaigen Reparaturkosten innerhalb eines Jahres abdeckt und einen Vorzugsservice mit kurzen Reaktionszeiten bietet.

Serviceumfang	BASIC LIGHT	BASIC	PLATINUM
MEDIACLAVE 10/30 Sicherheitscheck			
• Kontrolle des Drucksensors/MEDIACLAVE			
• Kontrolle des Temperatursensors (Heizung + Medium)/MEDIACLAVE			
• Kontrolle des Sicherheitsventils/MEDIACLAVE			
• Kontrolle des Kessels, einschließlich Bajonettverschluss des Kesseldeckels und Zugabe-Schalter/MEDIACLAVE			
• Kontrolle von Deckeldichtung, Kesselverschlüssen und Berstscheibe/MEDIACLAVE	✓	✓	✓
• Prüfung, ob alle Warnaufkleber vorhanden sind/MEDIACLAVE			
• Kontrolle der Sicherheitshaube/MEDIACLAVE			
MEDIAJET: Sicherheits- und Ausrichtungsprüfung			
• Prüfung, ob alle Warnaufkleber vorhanden sind			
• Kontrolle der Sicherheitshaube			
• Überprüfung der Ausrichtung von Karussell/Rotor und Feeder-/Stapler-Einheit			
Aktualisierung der Firmware je nach Verfügbarkeit und sofern angefordert	✓	✓	✓
Bevorzugte Terminplanung für die Serviceerbringung	-	✓	✓
Vorbeugende Wartung eines Geräts			
• Betriebstest			
• Überprüfung der mechanischen und elektrischen Teile		✓	✓
• Inspektion auf Verschleiß			
Detaillierte Dokumentation der vorbeugenden Wartung mit Checkliste	-	✓	✓
Testlauf mit Temperaturkalibrierung (MC) / Testlauf mit Positionsabgleich (MJ)	-	✓	✓
Wartungsaufkleber für das Gerät	-	✓	✓
Material und Arbeitszeit für Reparatur und Austausch verschlissener Geräteteile inbegriffen	-	-	✓
Vorzugsservice bei Störungen, auch bei Reparaturen	-	-	✓
Ein Jahr Garantie ab Vertragsdatum, einschließlich Material und Arbeitszeit für Reparaturen	-	-	✓


Bestellinformationen für vorbeugende Wartung vor Ort

Artikel-Nummer

Beschreibung	BASIC LIGHT	BASIC	PLATINUM
MEDIACLAVE vorbeugendes Wartungsprogramm	999335	999130	999140
MEDIAJET vorbeugendes Wartungsprogramm	999336	999131	999141

Bitte beachten Sie:

- Aus Sicherheitsgründen müssen beim **MEDIACLAVE** Wartungsintervalle von 1 Jahr bzw. 1.000 Zyklen eingehalten werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Die Geräte müssen zum Zeitpunkt des PLATINUM-Vertragsabschlusses neu bzw. in voll funktionsfähigem Zustand sein.
- PLATINUM-Verträge sind nur für Geräte erhältlich, die maximal 10 Jahre alt sind bzw. weniger als 10.000 **MEDIACLAVE-Zyklen** aufweisen.



Kontaktieren Sie uns:



www.integra-biosciences.com